



VELKOMMEN LR ZEITGARD!

STARTEN PÅ EN
NY EPOKE INNEN
SKJØNNHETSPLEIE!

GRATULERER MED DIN NYE ZEITGARD PRO!

Med Zeitgard Pro Cosmetic Device har du gjort det perfekte valget for din daglige skjønnhetspleie. Med fire forskjellige tilbehør tilbyr enheten deg fire mulige bruksområder for din individuelle pleierutine: Poredyp ansiktsrens, intensiv peeling, anti-age booster eller oppstramming av huden.

Velg den basispleien som passer din alder og hudbehov – dine ESSENTIALS. Suppler med dine spesialprodukter, til daglig bruk avhengig av dine individuelle hudbehov. I oversikten på side 10 og 11 kan du raskt finne dine personlige pleiefavoritter. Nyt din nye daglige skjønnhetsbehandling i ditt eget hjem!

VI ØNSKER DEG LYKKE
TIL PÅ VEIEN TIL TIDLØS
VAKKER HUD!



INNHOLD



Side 04 ANSIKTSRENS
FACE CLEANSING TOOL

Side 05 ANSIKTSRENS
FACE PEELING TOOL

Side 06 ANSIKTSPLEIE FACE
SMOOTHING TOOL

Side 07 NYTT VIRKESTOFF-
TRANSPORT-SYSTEM

Side 08 KROPPSPLEIE BODY
SKINCARE TOOL

Side 09 KROPPSPLEIE
BODY CREAM

Side 10 PLEIERUTINE
ESSENTIALS

Side 11 EKSTRA PLEIE
SPECIALS





Bytt børstehode
hver 3. måned!



POREDYP REN HUD

Huden regenereres intensivt i løpet av natten – den skiller ut talg og nye celler erstatter døde celler. Derfor bør også ansiktshuden rengjøres grundig om morgenen.

STEP 1: Fukt ansiktet med vann før du påfører rensekremen på huden. Slå på enheten og rens forsiktig venstre og høyre side av ansiktet og deretter pannen (T-sonen) – i ca. 20 sekunder på hvert område.

STEP 2: Etter rensing, klargjør ansiktshuden med Face Toner for videre pleie.



2 X PER DAG

Face Cleansing Tool overbeviser med et unikt hygiene-konsept. De myke børstefilamentene til rensbørsten er tilsatt antibakteriell Microsilver BG™*.

Cleansing Cream renser ansiktshuden skånsomt men grundig i kombinasjon med Face Cleansing Tool. Den delikate rensekremen med Harungana-ekstrakt støtter hudens regenerering og forbedrer hudbildet. Resultat: En revitalisert, lett mattet teint.



28000

*Takket være den antibakterielle effekten til LR-ingrediensen MICROSILVER BG™, forblir de enkelte børstefilamentene hygieniske i opptil 3 måneder. MICROSILVER BG™ består av rent sølvpulver med en svært porøs molekylstruktur. MICROSILVER BG™ regulerer dannelsen av nye bakterier på en vedvarende måte.

INTENSIV PEELING

Huden din fornyer seg omtrent hver 28. dag! De døde hudcellene får huden til å se blek og sliten ut. Bruk derfor peelingenheten to ganger i uken, som et alternativ til rensebørsten, for å fjerne gamle hudceller og få huden til å stråle!

STEP 1: Påfør rensekrem på fuktig ansiktshud, skyll av med vann, men ikke tørk ansiktet.

STEP 2: Slå på enheten og skyv metallspatelen forsiktig over den godt fuktete ansiktshuden i en vinkel på 45° i maksimalt 3 min. Arbeid alltid fra innsiden og ut og nedenfra og opp.



2 X PER UKE

Face Peeling Tool med innovativ ultralyd teknologi muliggjør en presis fjerning av døde hudceller, urenheter og overflødig talg fra porer og hårsekker. Huden ser da synlig glattere, friskere og yngre ut.



Face Toner klargjør og beroliger huden etter bruk av rensebørsten eller kavitasjonspeelingen. Styrker hudens naturlige beskyttende funksjon med sink PCA, allantoin og panthenol og har en oppkvikkende effekt takket være Harungana-ekstrakt.

28001

EKSTRA PLEIE AV HUDEN

For et optimalt resultat kan du også anvende Face Toner før bruk av Face Peeling Tool. Det er viktig at ansiktshuden alltid er godt fuktet. Ikke glem å påføre ansiktsvannet på nytt etter peelingen!

TIDLØS VAKKER STRÅLENDE HUD

Vakker hud er ikke et bare et spørsmål om alder, men om riktig pleie. Face Smoothing Tool gir ansiktshuden betydelig mer spenst og elastisitet. Den lar de aktive ingrediensene i pleieproduktene trenge dypere inn i huden, og reduserer synlig rynker.

STEP 1: Rengjør ansiktshuden med Face Cleansing Tool eller Face Peeling Tool.

STEP 2: Påfør et av de compatible pleieproduktene til LR ZEITGARD. Fordel små kremdotter på huden i ansiktet og masser inn med Face Smoothing Tool. Behandle hver del av ansiktet i 30 sekunder. Bruk sirkulære bevegelser fra innsiden og utover og nedenfra og opp.



ET FRISKT KICK



FOR ØYEOMRÅDET:
ØYEKREM OG MASKE I ETT
Bruk øyekremen som maske 2-3
ganger i uken – det gjør underverker!

28319 / 28194




SAMSPILLET MELLOM ULTRALYD OG LR ZEITGARD PLEIE



VIRKESTOFF-
TRANSPORT-
SYSTEM

Samtidig med lanseringen av Zeitgard Pro Cosmetic Device, har vi beriket formulaen til utvalgte pleieprodukter med et innovativt Virkestoff-Transport-System. Dette systemet fungerer som en anti-age booster. Sammen med Face Smoothing Tool økes den kosmetiske effekten av de verdifulle innholdsstoffene mange ganger. Ved å de først transportere til hudceller og deretter direkte inn i cellen frigjøres virkestoffene inne i cellen og utfolder sin fulle kraft der. På denne måten er det mulig å nå kilden til hudens aldring og bremse den gjennom målrettet næringstilførsel.

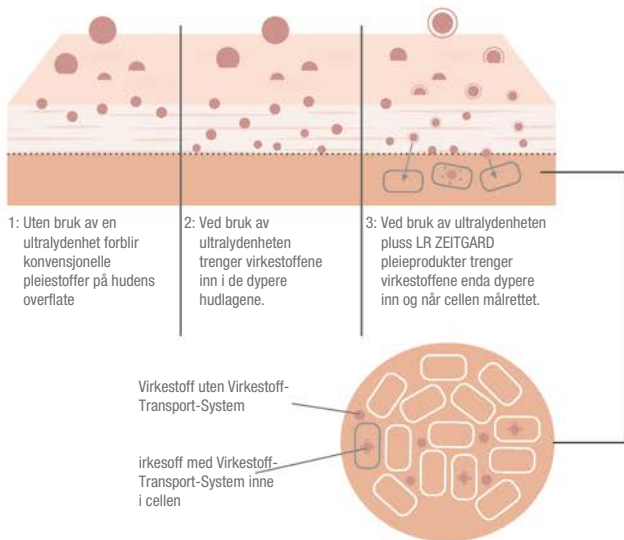

MER INFORMASJON OM
ANSIKTSPLEIEPRODUKTENE
PÅ SIDE 10





2 X PER DAG
SAMMEN MED
**FACE
SMOOTHING
TOOL**

EFFEKTIV STØTTE FOR EN FASTERE HUD


Ønsker du fastere hud på mage og lår? Løsningen er Zeitgard Pro! Ultralydmassasje med Body Skincare Tool sammen med aktiverende Body Cream gir et fastere og jevnere hudbilde. Daglig bruk bidrar til fastere bindevev og kan redusere cellulitter.

STEP 1: Påfør Body Cream 1-2 ganger om dagen.


STEP 2: Kremen masseres inn ved hjelp av Body Skincare Tool på de enkelte delene av kroppen i ca 2 minutter etter hverandre. Før enheten forsiktig i sirkulære bevegelser i retning av lymfeknutene: På bena i retning lysken, på magen i retning lysken, på baken i retning baksiden av kneet, på armene i retning armhulene.

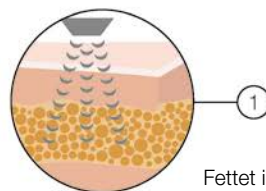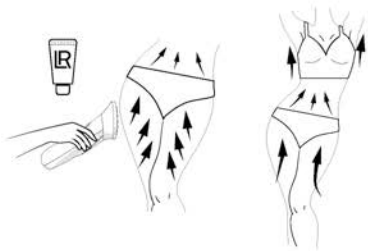

Fettet i hudcellene danner en ujevn overflate og får huden vår til å se "bulkete" ut.

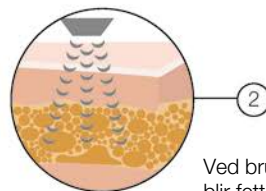

Ved bruk av ultralydbehandling blir fett i hudcellene flytende.

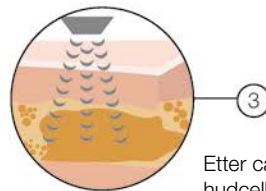

Etter ca. 2 minutter er fett i hudcellene i det behandlede området fullstendig flytende og er klart til å formes til en jevn, glatt overflate. Resultat: Huden virker jevnere og fastere.

**DAGLIG:**

Bruk Body Skincare Tool etter din daglige dusj. Dette er ren egenpleie!



Body Cream gjenoppbygger hudens naturlige kollagenstruktur, tilfører fuktighet og binder den i huden. Panthenol og vitamin E styrker hudens barrierefunksjon, hyaluronsyre og glatter den synlig ut. Huden får mer elastisitet og spenst og føles silkemyk og glatt.

28002



Virkestoff-Transport-System:
Innkapslet virkestoff styrker huden og gjør den smidigere

OVERSIKT: ESSENTIALS FOR DIN DAGLIGE SKJØNNHETSPLEIE

I kombinasjon med de fire enhetene til Zeitgard Pro Cosmetic Device, gir ESSENTIALS deg svært effektiv pleie for ansikt og kropp. Velg de riktige produktene for din alder og hudbehov ut fra denne oversikten og nyt en helt ny hudfølelse!

ZEITGARD PRO

ANSIKTSRENS

ANSIKTSPLEIE

KROPPSPLEIE



2 x
per dag



2 x
per uke

+

+



+



**NANO
GOLD**
Kvinner
opp til 40

2 x
per dag

+



Day Cream



Night Cream



Eye Cream

**BEAUTY
DIAMONDS**
Kvinner
over 40



Day Cream



Night Cream



Eye Cream

PLATINUM
Menn
fra 25



All-In-One
Cream



2 x
per dag

+



DINE SPECIALS FOR EKSTRA PLEIE

SPECIAL CARE | 11

Trenger du produkter som er utviklet for spesielle pleiebehov? Begynn med å bruke ESSENTIALS pleieprodukter og fortsett deretter med SPECIALS produkter som er tilpasset dine hudbehov.

HVORDAN BRUKER DU DINE SPECIALS?

Velg et spesialprodukt for dine nåværende hudbehov og påfør den direkte under din vanlige pleie etter rensing. Deretter jobber du begge produktene inn i huden samtidig med Face Smoothing Tool. Kun Sleeping Mask anvendes alene over natten.

SPECIAL CARE



Tørr og matt hud?

Beauty Diamonds Radiant Youth Oil nærer og regenererer huden med vitamin A, E og F. Beskytter mot fuktighetstap med verdifulle oljer: Arganolje, avokadoolje, jojobaalje, macadamianøtteolje, mandelolje, druekjerneolje. Let it glow!

28314



Aktiv beskyttelse mot digital aldring

Braker du mobiltelefon, nettbrett eller laptop hver dag? Blue Light Defender beskytter mot aldring av huden og hudirritasjoner forårsaket av blått lys. Med Spirulinaekstrakt og Blå Lotusekstrakt. For en ungdommelig, strålende hud.

71060



Umiddelbar hudperfeksjon

Vil du at huden din skal se perfekt og jevn ut? Serox Instant Result Serum med Ameliox® og Polylift® reduserer rynkedybden. Avspennende og fuktighetsgivende effekter forbedrer synlig hudbildet.

28251



Pleie og regenerering om natten

Sleeping Mask pleier og regenererer huden over natten. Med jojobaalje for optimal fuktighetstilførsel og Ultra Fylling Speres anti-age effekt. Med shizandra bær for hudens regenerering. Huden føles frisk og myk neste morgen.

71011

DET FINNES FLERE SPECIALS!

Du finner mer informasjon i LR COLLECTION og på vår hjemmeside: LRworld.com. Kontakt gjerne din LR partner for flere opplysninger om alle produktene.

DITT BEAUTY-STUDIO HJEMME



Innovativ,
høyt teknologisk



Anbefalt av
eksperter



Profesjonell
institutt kosmetikk



Høyeffektive
pleieformler

Lvert av:

Salg av LR-produkter skjer via LR-partnere.

LR Health & Beauty Systems AS · 3511 Honefoss

LR Health & Beauty Systems forbeholder seg retten til produktendringer ved tekniske eller kvalitetsmessige forbedringer. Det tas forbehold om feilinformasjoner pga. trykktfeil.

NO
96665-013